
VARIOFILL®
for Gluteal Augmentation

#it'sallabouttharmony




Lanzado en Alemania en 2021, Variofill® for Gluteal Augmentation es el primer y único relleno de ácido hialurónico diseñado específicamente para mejorar la estética de los glúteos con elegancia y precisión.

Descubre Variofill®

- Jeringa de 10 ml con diseño ergonómico. •
- 33 mg/ml de AH puro, grado farmacéutico inyectable •
 - Origen no animal. •
 - Alta Reología & Alta Cohesividad •
- Menor cantidad inyectada y resultados duraderos. •
- Óptima integración del gel en el tejido subcutáneo graso. •



Comparación Reología Rellenos de AH para glúteos y rellenos para volumen y contorno facial test a 100 rad/seg en pascales (Pa)

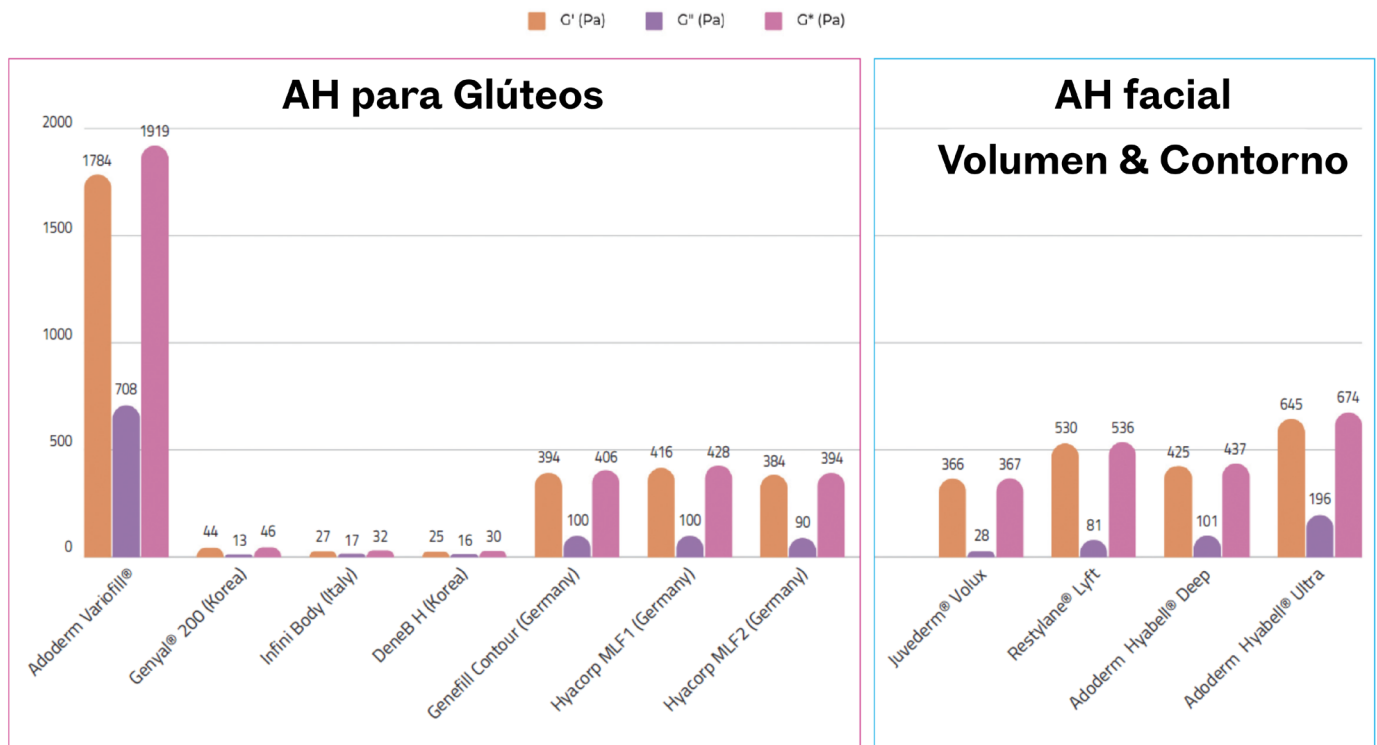

Pruebas reológicas realizadas por el Centro de Reología Industrial del Reino Unido, publicadas como póster electrónico en IMCAS 2025 World Congress.

Variofill® for Gluteal Augmentation es el único relleno de AH con una reología especialmente diseñada para dar forma, realzar y definir la zona glútea.

Otros rellenos de AH para glúteos tienen propiedades reológicas similares a los rellenos faciales, requieren volúmenes mayores, retoques frecuentes ofreciendo resultados poco duraderos.*

*S. Cotofana, M.D., Ph.D., Ph.D. et al. Change in Rheologic Properties of Facial Soft-Tissue Fillers across the Physiologic Angular Frequency Spectrum, Plastic and Reconstructive Surgery: August 2021 - Volume 148 - Issue 2 - p 320-331 doi: 10.1097/PRS.00000000000008188

Belleza sin esfuerzo con mínimas inyecciones: Resultados llamativos, elegantes y duraderos


Total Inyecciones Variofill®: 6

Contorno con 60 ml (30ml/lado). Seguimiento 18 meses, 1 sesión y sin retoques.




Total Inyecciones Variofill®: 10

Resultados con 100 ml (50 ml/lado) proyección + hip dip. Seguimiento a 9 meses sin retoques.

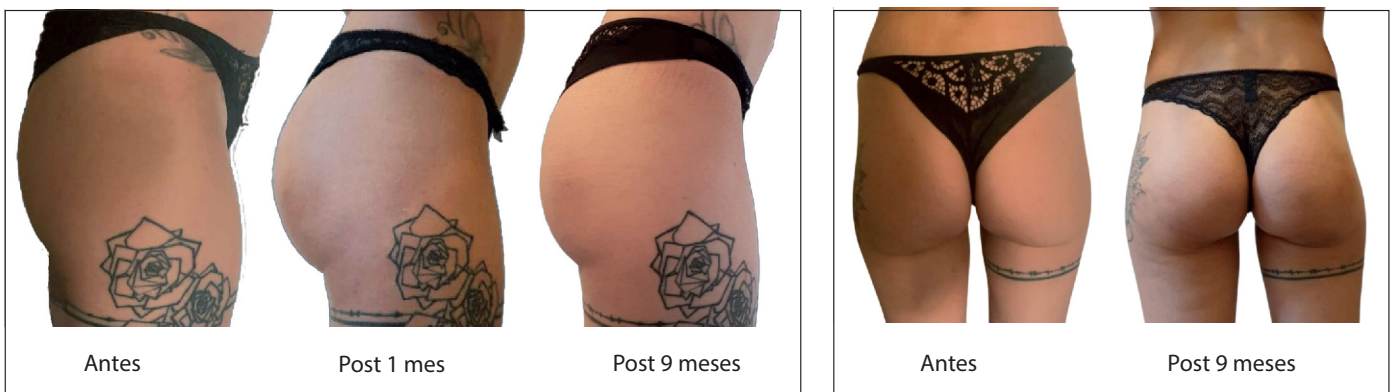


Total Inyecciones Variofill®: 14

Resultados con 140 ml (70ml/lado). Seguimiento a 12 meses. Protocolo en 2 sesiones.

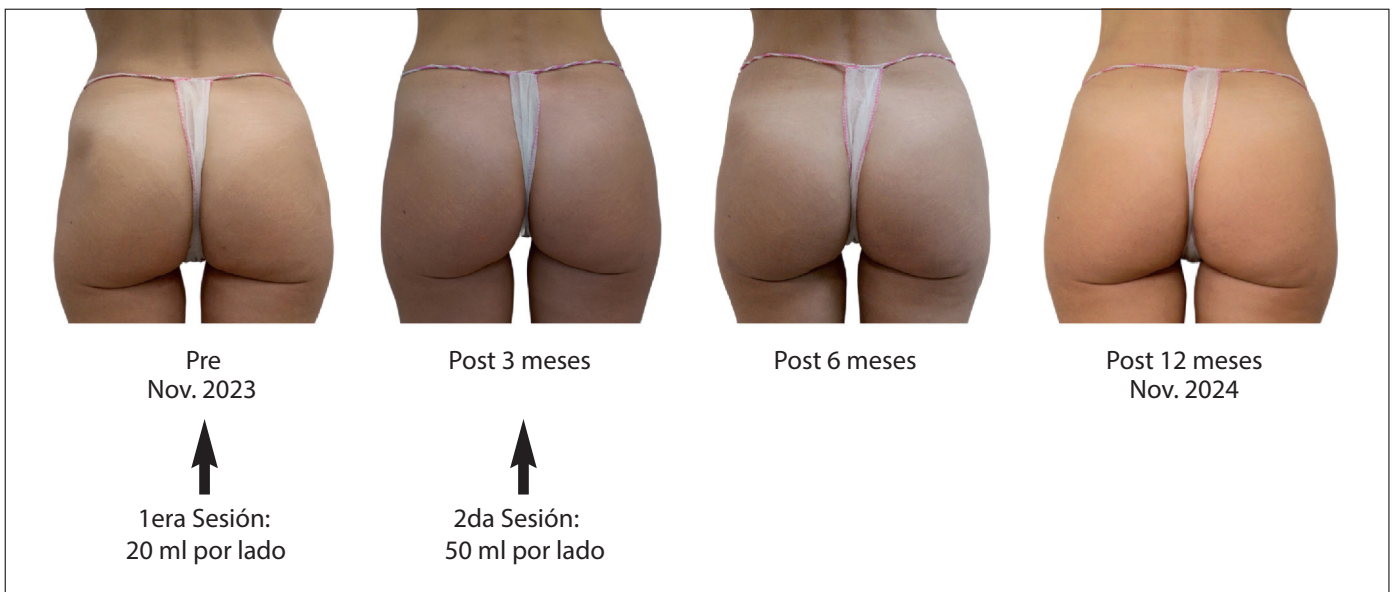



Más control y comodidad gracias a su ala digital ancha

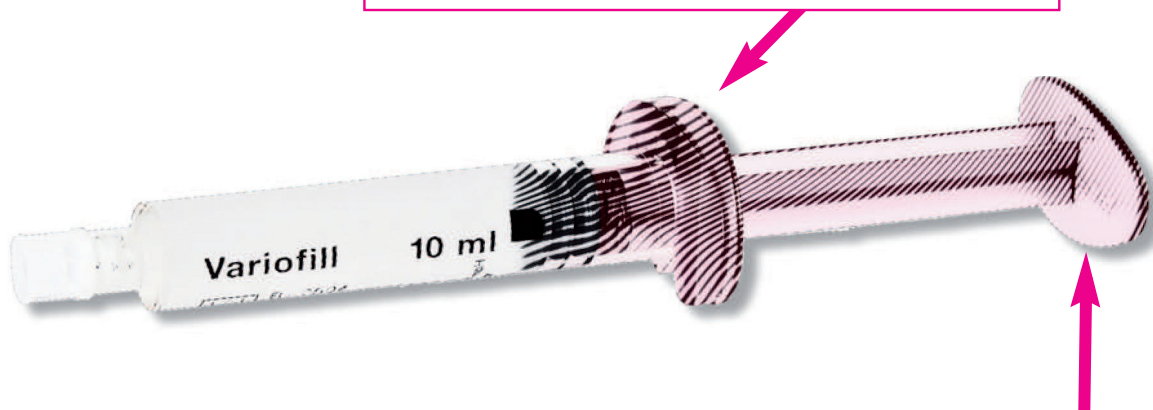


Apoyo cómodo en la palma gracias al diseño cóncavo del émbolo

Precisión y comodidad en cada detalle, con un diseño ergonómico y un acabado rosa que realza su estilo.

Recomendaciones de uso

- Evalúa si el paciente es apto para el tratamiento de glúteos.
- Se recomienda anestesia local. Preferible administrar primero anestesia tumescente.
- Procedimiento a realizar en condiciones similares a quirófano.
- Cánula roma y rígida (Recom. 14G o diámetro superior). No incluida en la caja.
- Inyectar en la capa subdérmica, dentro del tejido graso. No tocar el músculo.
- No sobre corregir.
- Mantener la armonía corporal y estética del paciente es clave.
- Equilibrar expectativas del paciente con sus límites fisiológicos.
- Tras la inyección, masajear para una distribución homogénea del gel y obtener la forma deseada.
- Proteger el área con gasas, bandas elásticas y prendas de compresión tipo VOE.
- Informar al paciente sobre el post-tratamiento, posibles efectos secundarios y reacciones adversas.

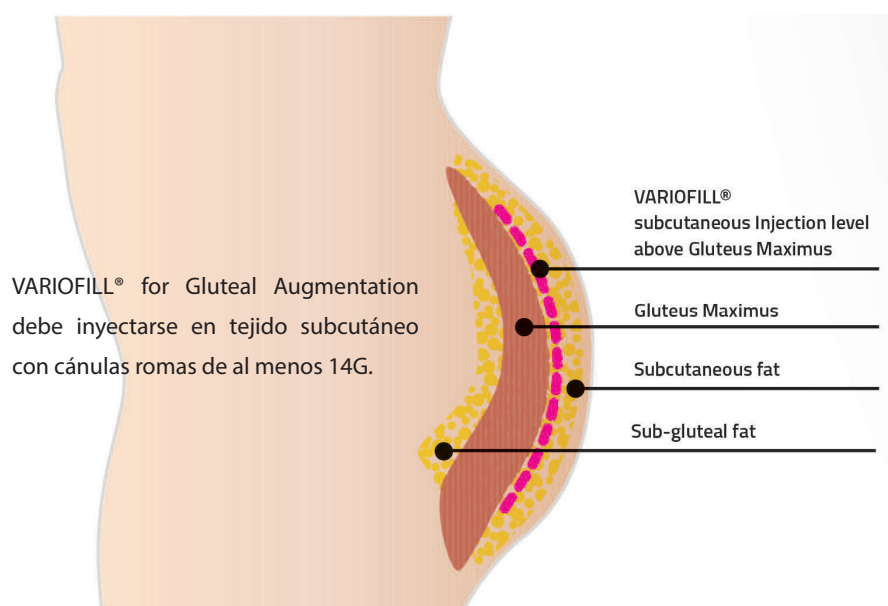


VARIOFILL®
for Gluteal Augmentation

¿Primera vez con Variofill® for Gluteal Augmentation?

Consigue tu Guía de Tratamiento gratuita con tu primer pedido.

Una guía completa sobre:

- Estética de los Glúteos
- Anatomía Gluteal
- Paso a paso de técnica de inyección.
- Manejo de efectos adversos

GUÍA DE TRATAMIENTO



Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios y eventos adversos? Como en cualquier procedimiento estético con ácido hialurónico, cada paciente puede reaccionar de forma diferente.

Los efectos secundarios asociados a VARIOFILL® for Gluteal Augmentation incluyen, entre otros: reacciones inflamatorias, enrojecimiento y edema que pueden ir acompañados de picor y dolor, sangrado local o hematomas en la zona inyectada, alergia al ácido hialurónico e induraciones con formación de nódulos, entre otros.

Eventos adversos posibles:

Se han descrito en la literatura casos de granulomas, urticaria, necrosis y embolia pulmonar no trombotica tras la inyección de ácido hialurónico. Consulte siempre el prospecto (IFU) para más información. Es fundamental informar al paciente sobre los riesgos asociados a los procedimientos estéticos.

¿Qué cuidados debe seguir el paciente tras el tratamiento?

Se recomienda informar al paciente que evite durante 2 a 4 semanas la práctica de actividades deportivas o aquellas que puedan afectar la cicatrización tras la inyección.

Debe evitarse también la exposición prolongada al sol, rayos UV, temperaturas frías, así como el uso de sauna o baño de vapor durante las 2 semanas posteriores al tratamiento.

Asimismo, se aconseja usar prendas de compresión durante 3 a 4 semanas.

Tecnología aplicada en VARIOFILL® for Gluteal Augmentation:

Desde hace más de 15 años, ADODERM diseña y produce rellenos dérmicos de ácido hialurónico con un proceso propio denominado: Monophasic Particle Technology™ (MPT).

Diseñamos nuestros productos según su uso previsto.

Nuestra tecnología MPT nos permite:


1. Obtener partículas de ácido hialurónico uniformes en tamaño y forma.
2. Ajustar el grado de reticulación según la indicación clínica.
3. Cada fórmula brinda un perfil reológico diferenciado que se ajustan a sus necesidades clínicas y estéticas.

Nuestros geles se definen por un equilibrio entre concentración y reología, adaptado a la profundidad de inyección y al volumen requerido, garantizando al mismo tiempo una extrusión suave y homogénea.^{4,5}


Todos nuestros productos están diseñados y fabricados en Alemania, y cuentan con la certificación (CE) de un Organismo Notificado alemán.



Solución
Ácido Hialurónico
33mg/ml

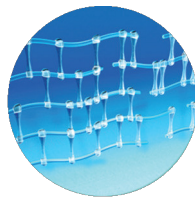

Estabilización del HA
para resultados más
duraderos

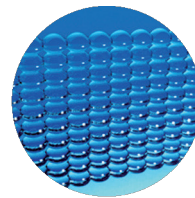

Partículas de HA
homogeneizadas para
lograr una textura de
gel uniforme.

Desde 2005, ADODERM desarrolla sus rellenos de ácido hialurónico según cinco principios fundamentales:



Concentración

Adaptada al grosor de la piel y a la cobertura grasa de la zona a tratar.




Grado de reticulación

Optimizado para ralentizar la degradación del gel de HA en el tiempo.



Reología

Específica para crear volumen, elevar o hidratar, con una profundidad de inyección adaptada a cada zona.

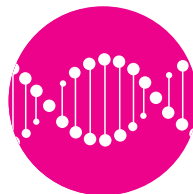

Estructura del Gel

Permite una proyección eficaz, alineación cutánea y una distribución adecuada según la zona tratada.



Fuerza de Extrusión

Suave y homogénea. La fuerza de extrusión está directamente relacionada con la precisión del tratamiento y el resultado final

4 – Bingöl A., Dogan A. Physical Properties of Hyaluronic Acid fillers and their relevance for clinical performance. MĂC. 6.2012; 6-12

5 – Dogan A, Andonovic L. Rheological properties of dermal fillers, Presented at 19th International Master Course on Aging Science IMCAS World Congress, January 26-29, 2017; Paris, France

Nota:

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation es un implante reabsorbible de ácido hialurónico reticulado, certificado con el marcado CE0297 por DQS-MED en Frankfurt, Alemania.

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation es un dispositivo médico no reembolsable por los seguros de salud.


El profesional debe informar al paciente sobre los posibles efectos secundarios relacionados con la implantación de este dispositivo, ya sean inmediatos o retardados.

Lista no exhaustiva: reacciones inflamatorias, sangrado, hematomas, pápulas acneiformes, alergia al ácido hialurónico, induraciones y granulomas inflamatorios.

Antes de su uso, consulte el prospecto para obtener información sobre la composición, características, precauciones de uso, indicaciones y contraindicaciones, incompatibilidades y posibles efectos adversos del dispositivo.

En caso de que los efectos secundarios persistan durante más de una semana, o si aparecen otros efectos no mencionados, el paciente debe informar al profesional lo antes posible para iniciar el tratamiento adecuado.

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation solo se vende a través de distribuidores autorizados y exclusivos, o directamente por el fabricante. La compra fuera de esta red no garantiza la autenticidad ni la trazabilidad del producto.



VARIOFILL®

for Gluteal Augmentation



CE
0297



Un producto diseñado y fabricado por

ADODERM

ADODERM GmbH ■ Elisabeth-Selbert-Strasse 5b ■ 40764 Langenfeld ■ Germany
www.adoderm.com